



REHASENSE

CARBON FIBER
ELEGANTIE EN
PRESTATIE



SERVER CF

CARBON FIBER TECHNOLOGIE

De Server CF carbon rollator weerspiegelt de elegantie en de prestatie van de Rehasense rollator lijn. De Server CF is Rehasense' laatste generatie superlichte carbon rollators met een gewicht rond de 5,5 kg. Deze rollator kan ingezet worden voor gebruikers met een gewicht tot 150 kg.

meer dan mobiliteit

SERVER CF

CARBON FIBER TECHNOLOGIE



REHASENSE

OPVOUWBAAR EN EENVOUDIG TE DRAGEN

De Server CF is makkelijk opvouwbaar en blijft gesloten door het eenvoudig te bedienen vergrendelingsysteem met de rode drukknop. Het vergrendelingsysteem doet tevens dienst als ergonomisch handvat om de rollator aan op te pakken.

SUPERLICHTGEWICHT

Door het bijzonder lage gewicht is deze rollator uitermate geschikt voor gebruikers met weinig kracht om toch de rollator zelf in de auto te kunnen tillen.

STABIEL EN DUURZAAM

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 150 kg. Zeer licht te bedienen met betrouwbare remmen. TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig druk te worden bediend. Mensen met weinig kracht in hun handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen.

HOOGTE INSTELBAAR EN COMFORTABEL

De handgrepen zijn soepel en makkelijk in hoogte verstelbaar vanaf 74 cm tot 102 cm. Meer comfort door gebruik te maken van de vaste zitting uit ons assortiment van accessoires of de ruggordel.

ACCESSOIRES

Hetzelfde brede assortiment aan accessoires van de Rehasense rollator lijn is ook beschikbaar voor de Server CF.



Soepel instelbare handgreep-hoogte met 10 arreterende posities.



Makkelijk opvouwbaar waardoor hij minder ruimte inneemt om weg te zetten.




Prachtig gevormd superlicht koolstofvezel frame, kan tot 150 kg belast worden.



Blijft ingevouwen stevig gesloten dankzij de drukknopvergrendeling.



Uitgevoerd met zachte wielen voor meer comfort voor het rijden op oneffen ondergrond.

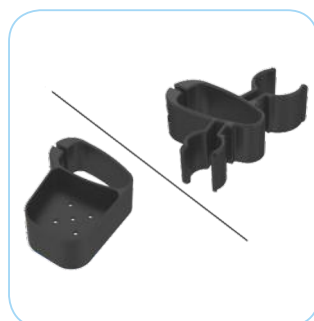

Inclusief stokhouder set

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren:



Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Bestelnummer:

CRBKL60N
CRBKL60NUP (met zachte wielen)
CRWRL60NUP (met zachte wielen)
CRSGL60NUP (met zachte wielen)

Afmetingen:

(breedte x diepte x hoogte)
61 x 68 x 74-102 cm

Zitbreedte: 46cm

Transportafmetingen

gevouwen:
(breedte x diepte x hoogte)
68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:

5,2 kg (+tas 370 g)

Boodschappentas:

(breedte x diepte x hoogte)

32 x 15 x 28 cm

Max. belasting: 5 kg.



BOODSCHAPPENTAS

Inclusief bijpassende luxe waterdichte boodschappentas voorzien van afsluitbare klep met magneetbandsluiting en binnenvak met ritssluiting. De dichte boodschappentas is eenvoudig van de rollator te nemen door de speciaal ontworpen haken.



De **Server CF** is **CE** -gecertificeerd en voldoet aan de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.

Copyright © Rehasense® 2019

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands